



## **Broadstairs Toilet Frame**



**VR202**

## **Fixing and Maintenance Instructions**



## INTRODUCTION

Thank you for deciding to purchase the Broadstairs Toilet Frame from Aidapt. The Broadstairs Toilet Frame is manufactured from the finest materials and components available, when used correctly it is designed to give many years of reliable trouble-free service.

**Please Note: Always consult with the prescriber/Physiotherapist if you are in any doubt that this product is suitable for your use.**

**NB. This equipment must be installed by a competent person.**

190 kg (30 st.) weight limit.

**Do not exceed the weight limit stated – doing so could put the user at risk.**

## BEFORE USE

- Carefully remove all packaging. Avoid using any knives or other sharp instruments as this may damage the surface of the product.
- Check the product for any visible damage. If you see any damage or suspect a fault, do not use your product as it may compromise your safety, but contact your supplier for support.

## CLEANING

All of the product components are manufactured from quality materials. However, it is very important that you only clean your toilet frame using a non-abrasive cleaner or mild detergent with a soft cloth and avoid using lime scale remover.


Under no circumstances use any abrasive cleaners or materials on any of the components. Also check that the cleaner you intend to use is suitable for ABS, Vinyl, Polymer Plastics and Thermo plastic rubbers and Polyurethane Rubber.

**NB. Regular daily cleaning will reduce the build up of limescale on your product.**

Body spillages should be cleaned as and when they occur (giving particular attention to the area where the frame width is extended), as this will avoid causing rust or corrosion which could damage/weaken the frame.

## ADJUSTMENTS TO HEIGHT/WIDTH EXTENSION LEGS

- Remove the 'E' clip from the extension leg and extend all four legs evenly to the desired height ensuring you do not exceed the last punched hole of the extension leg. (see fig. 1)
- Once you have achieved the desired height; reinstall the 'E' clip, ensuring that it has passed through the extension leg and is fitting neatly and snug around the outside leg. (see fig. 2).
- Never install the extension legs unevenly or slanting, this will compromise the safety of the user.
- Repeat the process for the width adjustment bars.

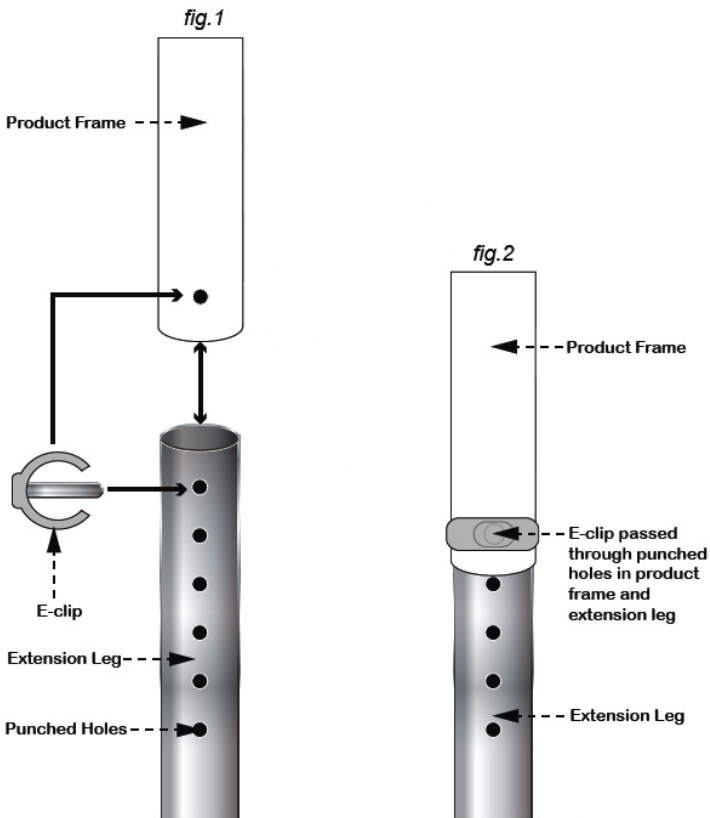

## **REISSUE**

If you reissue or are about to reissue this product, please thoroughly check all components for their safety.

This includes:

- Proper height adjustment
- Tightness of all nuts/ bolts/castors
- Other screw in/ bolt in/ push in components.
- Also check all upholstery for security, splits, etc.
- Width and leg extensions

**If in any doubt, please do not issue or use, but immediately contact your supplier for service support.**

## **CARE & MAINTENANCE**

Please make a safety check of the product at regular intervals or if you have any concerns. Please pay particular attention to the width and leg extensions.

## **IMPORTANT INFORMATION**

The information given in this instruction booklet must not be taken as forming part of or establishing any contractual or other commitment by Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd or its agents or its subsidiaries and no warranty or representation concerning the information is given.

Please exercise common sense and do not take any unnecessary risks when using this product; as the user you must accept liability for safety when using the product.

Please do not hesitate to contact the person who issued this product to you or the manufacturer (detailed below) if you have any queries concerning the assembly/use of your product.

**Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9 3EX**  
**Telephone: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web: [www.aidapt.co.uk](http://www.aidapt.co.uk)**  
**Email: [accounts@aidapt.co.uk](mailto:accounts@aidapt.co.uk) • [adaptations@aidapt.co.uk](mailto:adaptations@aidapt.co.uk) • [sales@aidapt.co.uk](mailto:sales@aidapt.co.uk)**



## **Cadre de toilette Broadstairs**



**VR202**

**Notice d'installation et d'entretien**



## INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté chez Aidapt le cadre de toilette. Le cadre de toilette Broadstairs est fabriqué depuis les meilleurs matériaux et composants disponibles, avec une utilisation adaptée, il est conçu pour vous servir et vous satisfaire pendant de nombreuses années.

**Veillez noter: Toujours consulter un prescripteur/kinésithérapeute si vous avez un doute concernant la commodité de ce produit à votre utilisation.**

**NB. Cet équipement doit être installé par une personne compétente.**

Limite de poids de 190 kg (30 stones)

**Veillez ne pas excéder la limite de poids indiquée, un manquement à cette recommandation pourrait mettre à risque son utilisateur.**

## AVANT UTILISATION

- Retirez parfaitement l'emballage. Évitez d'utiliser un couteau ou tout instrument coupant qui pourrait endommager la surface du produit.
- Vérifiez votre produit pour tout dommage visible. En cas de dommage ou de défaut suspect, veuillez ne pas utiliser votre produit car il pourrait compromettre votre sécurité et contactez votre fournisseur.

## NETTOYAGE

Tous les composants du produit sont fabriqués à partir de matériaux de qualité. Cependant, il est très important de nettoyer votre cadre de toilette en utilisant un détergent non abrasif ou doux et avec un chiffon doux en évitant d'utiliser un produit détartrant.


En aucune circonstance, n'utilisez des nettoyeurs ou matériaux abrasifs sur un des composants. Assurez-vous également que le nettoyeur que vous utilisez est adapté à l'ABS, vinyle, plastiques polymères et caoutchouc thermoplastique et caoutchouc polyuréthane.

**NB. Un nettoyage quotidien et régulier réduit la formation de dépôt calcaire sur votre produit.**

Les renversements de liquides corporels doivent être nettoyés quand ils se produisent (en donnant une attention particulière à la zone où la largeur du cadre est élargie), cela permettant d'éviter l'oxydation ou la corrosion pouvant endommager le cadre.

## AJUSTEMENTS DES PIEDS D'EXTENSION EN LARGEUR/HAUTEUR

- Enlevez le clip "E" du pied d'extension et tirez les pieds de manière égale à la hauteur désirée en vous assurant de ne pas excéder le dernier orifice de montage du pied d'extension. (voir fig. 1)
- Une fois la hauteur désirée atteinte, réinstallez le clip "E", en vous assurant qu'il est passé à travers le pied d'extension et qu'il est ajusté et serré autour du pied extérieur. (voir fig. 2).
- Ne jamais installer les pieds d'extension avec une hauteur inégale ou de manière inclinée, cela compromettrait la sécurité de l'utilisateur.
- Répétez le procédé pour les barres d'ajustement de la largeur.

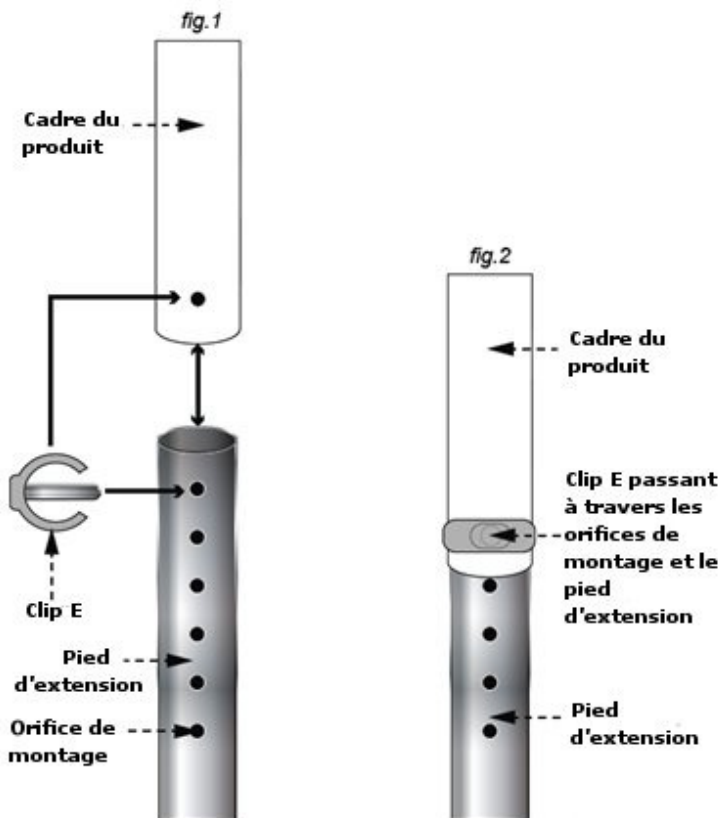

## RÉUTILISATION

Si vous réutilisez ou êtes sur le point de réutiliser ce produit, veuillez vérifier minutieusement tous les composants du produit et leur sûreté.

Cela comprend:

- Un ajustement adapté de la hauteur
- Le serrage de tous les écrous/boulons/roulettes
- Autres vis/boulons/poussoirs des composants.
- Vérifiez également tous les revêtements pour la sécurité, les déchirures, etc.
- Extensions de la hauteur et des pieds

**En cas de doute, veuillez ne pas utiliser le produit et contactez immédiatement votre fournisseur.**

## SOIN ET ENTRETIEN

Effectuez un contrôle de sécurité régulier de votre produit ou dans le cas où vous auriez un doute. Veuillez accorder une attention particulière aux extension de la largeur et des pieds.

## INFORMATIONS IMPORTANTES

Les informations contenues dans ce livret d'instructions ne doivent pas être considérées comme faisant partie de ou établissant un contrat ou un engagement quelconque par la société Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd ni par ses représentants ou ses filiales et aucune garantie concernant les informations n'est donnée.

Nous vous remercions de bien vouloir faire preuve de bon sens et de ne pas prendre de risques inutiles lorsque vous utilisez ce produit; en tant qu'utilisateur, vous devez accepter et être conscient de votre responsabilité quant à votre sécurité lorsque vous utilisez ce produit.

Veuillez ne pas hésiter à contacter la personne qui vous a fourni ce produit ou le fabricant (coordonnées ci-dessous) pour davantage de renseignements concernant l'installation/utilisation de votre produit.

**Altai France (Altai Europe Ltd)**  
**Z.A. du Bel Air, 17D rue de Creil, 95340 BERNES-SUR-OISE, France**  
**Tél: 01.30.34.90.84 | Fax: 01.30.34.00.68 | E-mail: altaieurope@orange.fr**



## **Toilettenrahmen “Breite Treppe”**



**VR202**

**Aufbau- und Wartungsanleitung**



## EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihren Erwerb dieses Toilettenrahmens von Aidapt. Dieses Produkt wurde aus den besten verfügbaren Materialien angefertigt. Es wurde entwickelt, um bei richtiger Anwendung viele Jahre zuverlässig und störungsfrei zu funktionieren.

**Bitte beachten: Konsultieren Sie stets Ihren verschreibenden Arzt oder Physiotherapeuten, sollten Sie Zweifel daran haben, dass dieses Produkt für Sie geeignet ist.**

**Achtung: Dieses Produkt muss von einer kompetenten Fachkraft installiert werden.**

Die Gewichtsbeschränkung beträgt 190 kg.

**Auf keinen Fall die Gewichtsbeschränkung überschreiten – dies könnte den/die Benutzer/in gefährden.**

## VOR GEBRAUCH

- Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung. Verwenden Sie keine Messer oder andere scharfe Instrumente, da diese die Oberfläche des Produkts beschädigen können.
- Bitte überprüfen Sie Ihr Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Falls Sie einen Schaden erkennen oder einen Fehler vermuten, bitte verwenden Sie das Produkt nicht, sondern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

## REINIGUNG

Alle Produkt-Komponenten werden aus hochwertigen Materialien hergestellt. Dennoch ist es sehr wichtig, dass Sie Ihre Duschstühle und -sitze mit einem nicht-scheuernden Reiniger oder einem milden Waschmittel und mit einem weichen Tuch säubern. Vermeiden Sie Kalkentferner.


Verwenden Sie keinesfalls Scheuermittel. Stellen Sie auch sicher, dass der Reiniger, den Sie verwenden, geeignet ist für ABS, Vinyl, Polymer- und thermoplastische Kunststoffe sowie Polyurethan.

**ACHTUNG: Reinigen Sie Ihr Produkt täglich, um Kalkablagerungen zu reduzieren.**

Bei Verschmutzungen sollten Sie das Gerät sofort reinigen (mit besonderem Augenmerk auf dem Bereich, wo sich der Rahmen verbreitern lässt), um ein Rosten oder Korrosion zu vermeiden, was den Rahmen beschädigen könnte.

## HÖHEN/BREITENEINSTELLUNG

- Entfernen Sie hierzu die E-Clips von den ausziehbaren Beinen und ziehen Sie jeden Bein auf die gewünschte Länge aus (siehe Abb. 1). Achten Sie darauf, dass alle vier Beine die gleiche Länge haben und Sie nicht das letzte Justierloch überschreiten.
- Achten Sie darauf, dass alle vier Beine die gleiche Länge haben und Sie nicht das letzte Justierloch überschreiten. Setzen Sie danach alle E-Clips wieder ein. Stellen Sie dabei sicher, dass die E-Clips vollständig durch den Rahmen und die Beine hindurch reichen und fest sitzen (siehe Abb. 2).
- Die Standbeine niemals ungleich oder schräg einstellen, da dies die Sicherheit des/der Benutzers/in beeinträchtigt.
- Wiederholen Sie den Prozess für die Breitereinstellung.

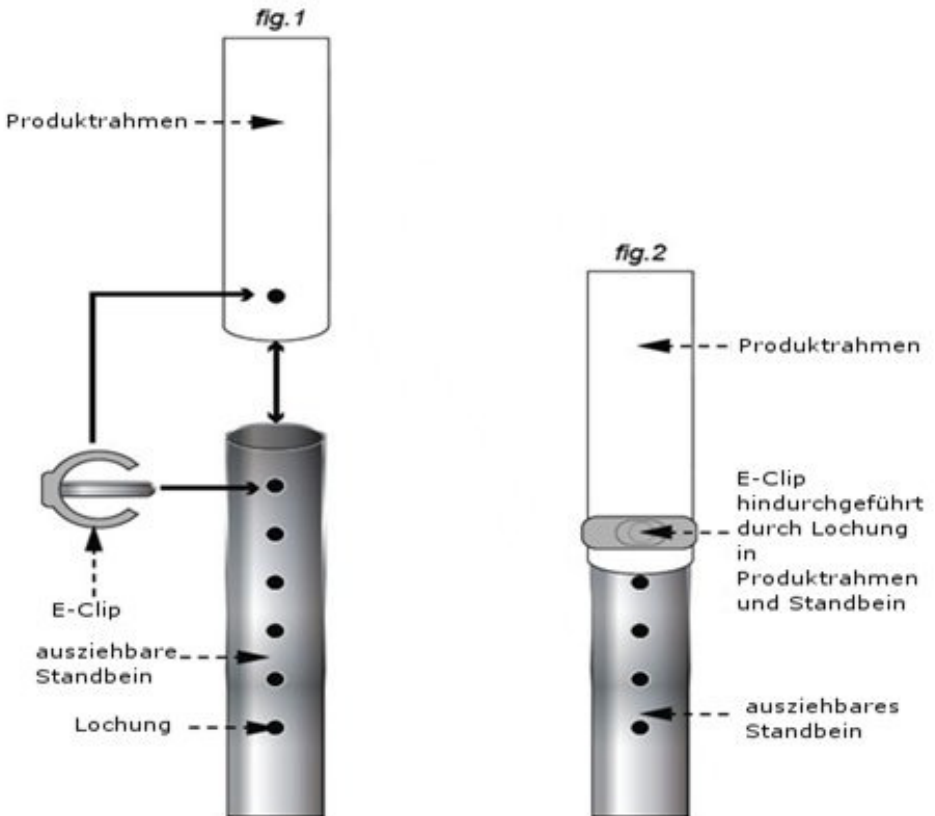

## **NEUVERGABE**

Wenn Sie dieses Produkt neu vergeben oder gerade dabei sind, es neu zu vergeben, bitte überprüfen Sie alle Komponenten gründlich auf ihre Sicherheit.

Dies umfasst:

- funktionierende Höheneinstellung
- Dichtheit aller Muttern/Schrauben/Rollen
- andere Schraub-/Bolzen-/Eindrück-Komponenten
- Überprüfung der Polsterung auf Sicherheit, Risse etc.
- Auszüge zur Höhen- und Breiteneinstellung

**Im Zweifelsfall bitte das Gerät nicht verwenden oder neu vergeben, sondern sofort Ihren Händler kontaktieren.**

## **PFLEGE & WARTUNG**

Bitte führen Sie in regelmäßigen Abständen oder wenn Sie irgendwelche Bedenken haben eine Sicherheitsprüfung des Produkts durch. Bitte achten Sie besonders auf die Auszüge zur Höhen- und Breiteneinstellung.

## **WICHTIGE INFORMATIONEN**

Die Informationen, die in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind, sind nicht Grundlage oder Teil einer vertraglichen oder anderweitigen Verpflichtung von Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd. oder einer ihrer Vertreter oder ihrer Tochtergesellschaften und es wird keine Garantie oder verbindliche Vertretung bezüglich der betreffenden Informationen gegeben.

Bitte handeln Sie nach gesundem Menschenverstand und nehmen Sie keine unnötigen Risiken bei der Verwendung dieses Produkts in Kauf; als Nutzer haften Sie für die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts.

Bitte zögern Sie nicht, die Person, die dieses Produkt an Sie vergeben hat, oder den Hersteller (unten beschrieben) zu kontaktieren, wenn Sie Fragen zur Montage/Verwendung Ihres Produkts haben.

**Altai Germany (Altai Europe Ltd.)  
Reklamationen & Rücksendungen an:  
W.H. Elektronik, Merowingerstraße 83, 47533 Kleve  
Tel: 02821/971620 | Fax: 02821/12815**